

Acura® capillar

gestire anche i liquidi più difficili

nuovo

micropipette a spostamento positivo



Micropipette a spostamento positivo ad alte prestazioni con tubo capillare in vetro e stantuffo rinforzato in ETFE intercambiabile. L'impugnatura sagomata e l'attivazione senza sforzo dello stantuffo offrono la massima ergonomia durante la dispensazione dei liquidi viscosi e schiumosi o solventi volatili.

Caratteristiche della linea Acura® capillar 846:

- Appoggio per dito compatto e confortevole
- Attivazione senza sforzo dello stantuffo
- Regolazione affidabile dei volumi preimpostati
- Codici di colore corrispondenti su pipetta, pistone e tubo capillare
- Stantuffo in acciaio inossidabile, con rinforzo in ETFE




Acura® capillar

846

 **SOCOREX**
SWISS

Acura® capillar

gestire anche i liquidi più difficili

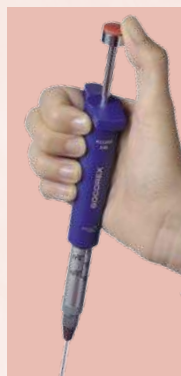

Massima praticità d'uso per il pipettaggio

La forma compatta dello strumento si adatta ad ogni mano. L'apposito appoggio consente di posizionare comodamente il dito sulla pipetta.

► Attivazione dolce

Il sistema a molla ben progettato riduce lo sforzo necessario sullo stantuffo.



► Regolazione del volume affidabile

Ogni pipetta dispone di cinque volumi preimpostati facili da regolare. Volumi chiaramente indicati sul cilindro della pipetta.



► Codice di colore

Pipetta, puntale dello stantuffo e tubo capillare dello stesso colore per agevolare l'identificazione dei volumi.



► Stantuffo rinforzato in ETFE

Il materiale ETFE, chimicamente inerte, offre un'eccellente resistenza a diretto contatto con i liquidi.

► Garanzia

Modello 846 non sterilizzabile in autoclave. Lo strumento è coperto da garanzia di tre anni.



846

1 - 5 µl
5 - 25 µl
10 - 50 µl
60 - 100 µl
100 - 200 µl

Supporto 340

Supporto per alloggiamento da 1 a 3 pipette.

Prestazioni e informazioni relative all'ordine - Strumento

Volumi	Inesattezza (E%)			Imprecisione (CV%)			N. cat.
	Vol. min.	Vol. medio	Vol. max.	Vol. min.	Vol. medio	Vol. max.	
1-2-3-4-5 µl	< +/- 3.0 %	< +/- 2.3 %	< +/- 2.0 %	< 2.5 %	< 2.0 %	< 1.2 %	846.005
5-10-15-20-25 µl	< +/- 1.5 %	< +/- 1.2 %	< +/- 0.8 %	< 1.0 %	< 0.9 %	< 0.6 %	846.025
10-20-30-40-50 µl	< +/- 1.2 %	< +/- 1.0 %	< +/- 0.7 %	< 0.8 %	< 0.7 %	< 0.4 %	846.050
60-75-80-90-100 µl	< +/- 0.7 %	< +/- 0.7 %	< +/- 0.7 %	< 0.6 %	< 0.5 %	< 0.3 %	846.100
100-120-150-175-200 µl	< +/- 0.7 %	< +/- 0.7 %	< +/- 0.7 %	< 0.3 %	< 0.3 %	< 0.3 %	846.200

Valori di prestazione ottenuti con acqua bidistillata a temperatura costante ($\pm 0,5^\circ\text{C}$) compresa tra 20 e 25°C in conformità con la direttiva EN ISO 8655

Informazioni relative all'ordine - Accessori

Codice di colore	Imballo	N. cat.	Codice di colore	Imballo	N. cat.
Tubi capillari in vetro di ricambio			Stantuffi di ricambio		
Bianco	200 / conf.	341.005	Acciaio	5 / conf.	342.005
2 x bianco	200 / conf.	341.025	Bianco	5 / conf.	342.025
Verde	200 / conf.	341.050	Verde	5 / conf.	342.050
Blu	200 / conf.	341.100	Blu	5 / conf.	342.100
Rosso	100 / conf.	341.200	Rosso	5 / conf.	342.200

Descrizione	Imballo	N. cat.
Supporto per pipette Socorex (tutti i modelli), grigio chiaro	1 / conf.	320.340



SAS Accredited
Service Laboratory
ISO/IEC 17025

G.M. SYSTEM
ISO 9001/13485
CERTIFIED

Vostro rivenditore

Distribuito da:

ENRICO BRUNO s.r.l.
APPARECCHI SCIENTIFICI
SANITARI - INDUSTRIALI

SOCOREX
SWISS

SOCOREX ISBA SA
Champ-Colomb 7, casella postale
1024 Ecublens/Lausanne
Svizzera
sorex@sorex.com
www.sorex.com
Tel. +41 (0)21 651 6000

F.846.IT - A614