

Camera contaglobuli THOMA doppia con pinze

con reticolo a linee scure

Le camere contaglobuli si differenziano per le griglie di conteggio e per la profondità delle camere.

Linee perpendicolari, incise nella superficie della base della camera, formano una griglia che diventa visibile al microscopio.


Approvate per applicazioni (IVD) diagnostici in vitro, secondo la direttiva IVD 98/79 / CE, con marchio CE

A richiesta sono disponibili camere contaglobuli con reticolo "Bright Lines" che facilitano la valutazione del campione grazie alle linee luminose che contrastano bene con lo sfondo scuro.

La profondità della camera di Thoma è di 0,1 mm.

La griglia di conteggio copre un'area $1 \times 1 \text{ mm}^2$ ed è suddivisa in gruppi quadrati con i lati di 0,22 mm (come nel sistema Neubauer).

I gruppi quadrati sono suddivisi in 16 quadratini aventi un'area di $0.05 \text{ mm} \times 0.05 \text{ mm} = 0.0025 \text{ mm}^2$

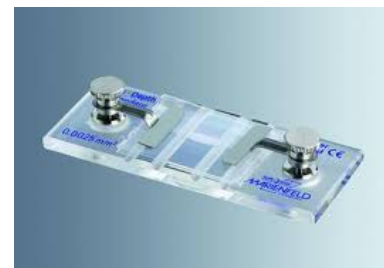

Codice	Descrizione
1221011	Camera contaglobuli THOMA doppia con pinze con reticolo a linee scure