

## Pipetta automatica a dosaggio ripetitivo Brand mod. HandyStep® Touch e HandyStep® Touch S

Le pipette a dosaggio ripetitivo, specie in caso di serie in continuo, non dovrebbero stancare l'utilizzatore.

Dosare lunghe serie con elevata precisione in modo semplice, in armonia senza sforzi ed affaticamento della mano è sicuramente di grande importanza.



La nuova pipetta ripetitiva di BRAND è la prima scelta quando si tratta di dispensazione efficiente di lunghe serie.

- ☑ Semplice: funzionamento tramite touchscreen
- ☑ Facile: compatibile con puntali di altri produttori
- ☑ Efficiente: espulsione automatica del puntale

Con il display touchscreen puoi scorrere comodamente avanti e indietro tra le funzioni e avere sempre una panoramica delle informazioni essenziali sulle tue fasi di lavoro.

Il funzionamento è facile, anche con i guanti protettivi.







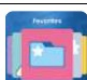

E parlando di facilità, i giorni in cui si cambiavano manualmente i puntali sono finiti.

Sull'HandyStep® touch, è sufficiente toccare leggermente l'icona Eject sul display per espellere la punta.

Impostazione rapida del volume tramite tastiera

Nuovi intervalli di volume per l'erogazione multipla: per una flessibilità ancora maggiore nell'impostazione del volume, la nuova versione offre intervalli di passo più fini in tutte le modalità.

Promemoria calibrazione: oltre a salvare l'ultima calibrazione, ora puoi anche impostare un promemoria per la prossima data di calibrazione.

Mode		Function	HandyStep® touch	HandyStep® touch S
Multi Dispensing (MULTI-DISP)		Successive dispensing of a set volume	✓	✓
Auto Dispensing (AUTO-DISP)		Automatic dispensing by the instrument	✓	✓
Pipetting (PIP)		Pipetting a defined volume	✓	✓
Sequential Dispensing (SEQ-DISP)		Successive dispensing of different volumes	—	✓
Multi Aspirating (MULTI-ASP)		Aspirating different volumes	—	✓
Titration		Manual or successive delivery of liquids for titration	—	✓
Favorites		Saving favorites for quick access	✓	✓
Settings		Individual customization of the device (e.g. brightness or device name)	✓	✓

Codice	Descrizione
53705200	Pipetta automatica a dosaggio ripetitivo Brand mod. HandyStep® Touch
53705201	Pipetta automatica a dosaggio ripetitivo Brand mod. HandyStep® Touch con supporto di ricarica
53705210	Pipetta automatica a dosaggio ripetitivo Brand mod. HandyStep® Touch S
53705211	Pipetta automatica a dosaggio ripetitivo Brand mod. HandyStep® Touch S con supporto di ricarica