


115195 M - VPV 1420 2\_0  
SKINPLATE WHITE



UniMedical


Linea **CLASSIC STANDARD**

Vetrina a temperatura positiva per prodotti Farmaceutici e da Laboratorio

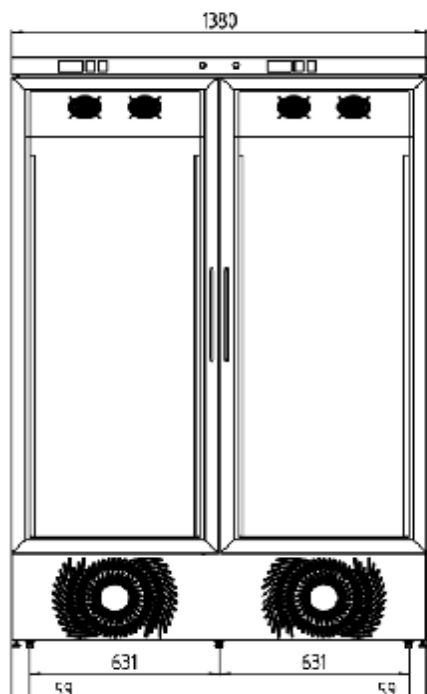

### Caratteristiche

<b>Campo Temperatura</b>	Regolabile da +1°C a +15°C Risoluzione al decimo di grado (0.1°C), accuratezza +/- 0,3°C
<b>Capacità</b>	1420 litri
<b>Dimensioni d'ingombro</b>	L1380 x P860 x H2064 mm
<b>Struttura ed Isolamento</b>	Acciaio Plastificato Atossico. Bianco. Poliuretano schiumato senza CFC/HCFC densità 40 Kg/m3 spessore 60 mm
<b>Porta</b>	Vetrata con triplo vetro temprato, chiusura automatica con freno a 90°
<b>Serratura</b>	Serratura con chiave di serie
<b>Rotelline unidirezionali</b>	N° 06 Ruote orientabili di cui 3 frenate
<b>Illuminazione</b>	Full Led ad alta intensità
<b>Dotazione interna</b>	Cestelli Ripiani o cassette - foro passacavo (Optional)
<b>Controllore</b>	Doppio Termostato Elettronico Dixell XR 775 C HACCP
<b>Allarmi</b>	Acustico-visivo per temperature, black-out, porta aperta e sonde. Tutti remotizzabili tramite contatto pulito (Optional)
<b>Termostato di sicurezza</b>	A richiesta DIN 58345
<b>Registrazione Allarmi</b>	Max 20 allarmi memorizzati sul Termostato
<b>Registrazione della Temperatura</b>	Data Logger (Optional)
<b>Consumo nelle 24 ore (a luci spente)</b>	9,6 kWh
<b>Rumorosità</b>	Max 50 dB
<b>Refrigerazione</b>	Ventilata forzata a bassa umidità con doppio compressore
<b>Gas</b>	R 290
<b>Sbrinamento</b>	Automatico con evaporazione acqua di condensa
<b>Sonde simulazione temperatura prodotto</b>	Sonde NTC di serie
<b>Conformità Direttive</b>	Cert Ce
<b>Imballo</b>	Cartone su pallet

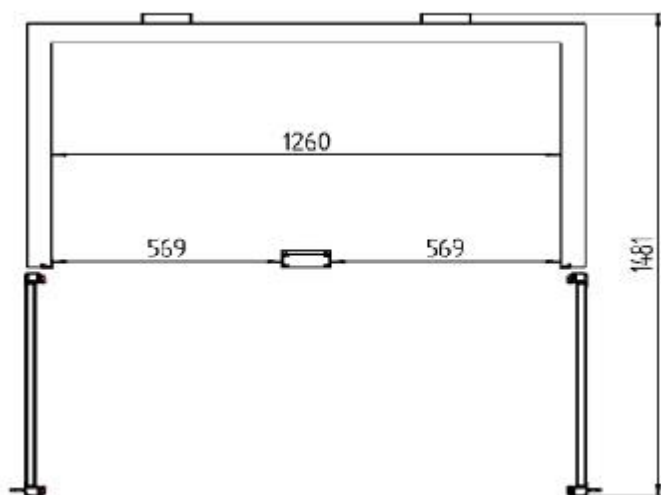

### TECNOLOGIA "CLASSIC"

Basata su un termostato HACCP con display digitale che indica l'ora e la temperatura con la precisione del decimo di grado ( $0.1^{\circ}\text{C}$ ), provvisto di segnalazione di allarme visiva e acustica, nonché di una predisposizione per la remotizzazione del segnale d'allarme attraverso un "contatto pulito", è in grado di fornire tutta la sicurezza necessaria alla conservazione di ogni tipo di medicinale.

Semplicemente premendo il tasto HACCP si può consultare la lista degli ultimi 20 allarmi registrati corredati dell'ora dell'avvenuto allarme e della sua durata. Il sistema rileva allarmi di alta temperatura, di bassa temperatura e di black out. Ormai di serie è l'avviso acustico/visivo di allarme "porta aperta". Possibilità di inserire un DATA LOGGER (Optional) esterno per il monitoraggio della temperatura

