


116102 M-ANV 420
SKINPLATE WHITE



UniMedical

Linea **CLASSIC**



Armadio a temperatura Negativa per prodotti Farmaceutici e da Laboratorio

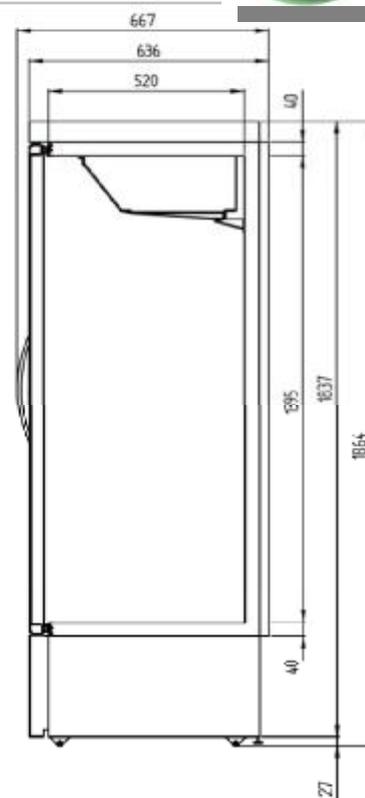

Caratteristiche

Campo Temperatura	Regolabile da -15°C a -25°C Risoluzione al decimo di grado (0.1°C), accuratezza +/- 0,3°C
Capacità	420 litri
Dimensioni d'ingombro	685 x 636 x 1864 mm
Struttura ed Isolamento	Acciaio Plastificato Atossico Bianco usato sia per l'interno che per l'esterno del mobile. Poliuretano schiumato senza CFC/HCFC densità 40 Kg/m3 spessore 45 mm
Porta	Cieca schiumata senza CFC/HCFC densità 40 Kg/m3 con chiusura automatica e con freno a 90°
Serratura	Serratura con chiave di serie
Rotelline unidirezionali	N° 04 + 02 piedini stabilizzatori
Illuminazione	Full Led ad alta intensità
Dotazione interna	Ripiani o cassette - foro passacavo (Optional)
Controllore	Termostato Elettronico Dixell XR 775 C HACCP
Allarmi	Acustico-visivo per temperature, black-out, porta aperta e sonde. Tutti remotizzabili tramite contatto pulito (Optional)
Registrazione Allarmi	Max 20 allarmi memorizzati sul Termostato
Registrazione della Temperatura	Data Logger (Optional)
Consumo nelle 24 ore (Luci Spente)	3,9 kWh
Rumorosità	Max 49 dB
Refrigerazione	Ventilata forzata a bassa umidità
Gas	R 290
Sbrinamento	Automatico con evaporazione acqua di condensa

Sonde sim. temperatura prodotto	Sonde NTC di serie
Conformità Direttive	Cert. Ce
Imballo	Cartone su pallet

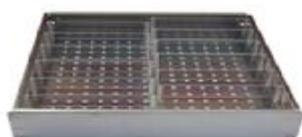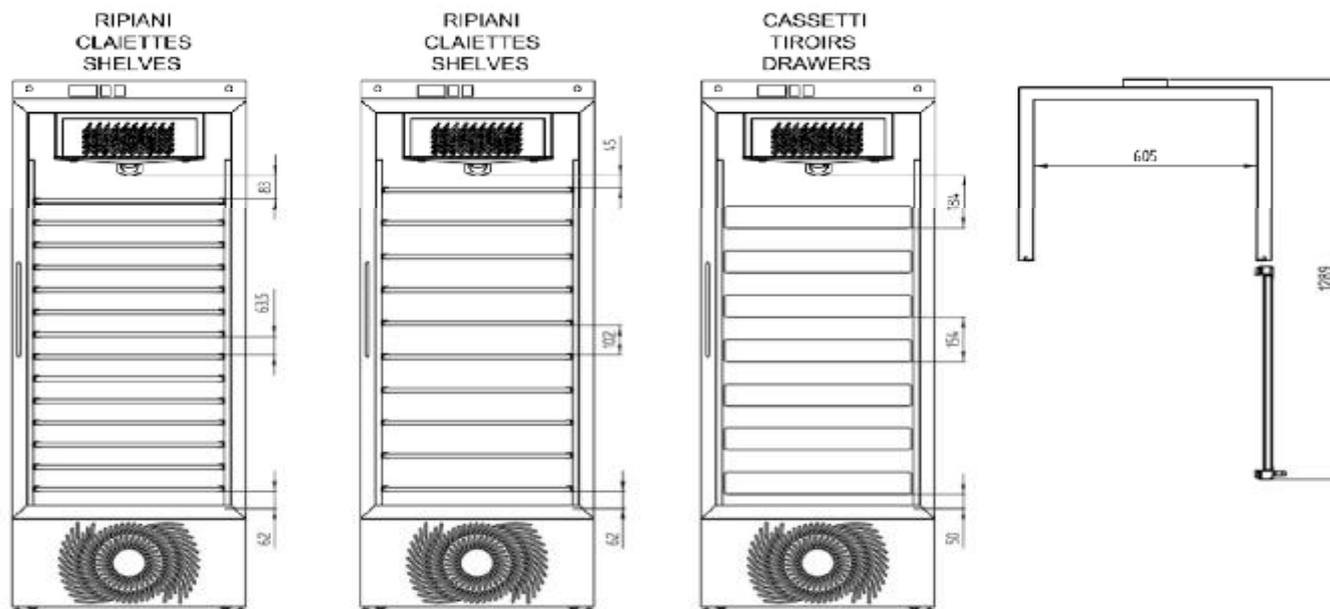

CASSETTO IN ALLUMINIO GOFRATO



RIPIANO IN ALLUMINIO GOFRATO



TERMOSTATO ELETTRONICO



DATA LOGGER

TECNOLOGIA "CLASSIC"

Basata su un termostato HACCP con display digitale che indica l'ora e la temperatura con la precisione del decimo di grado (0.1°C), provvisto di segnalazione di allarme visiva e acustica, nonché di una predisposizione per la remotizzazione del segnale d'allarme attraverso un "contatto pulito", è in grado di fornire tutta la sicurezza necessaria alla conservazione di ogni tipo di medicinale.

Semplicemente premendo il tasto HACCP si può consultare la lista degli ultimi 20 allarmi registrati corredati dell'ora dell'avvenuto allarme e della sua durata. Il sistema rileva allarmi di alta temperatura, di bassa temperatura e di black out.

Ormai di serie è l'avviso acustico/visivo di allarme "porta aperta". Possibilità di inserire un DATA LOGGER (Optional) esterno per il monitoraggio della temperatura